



PRODEBISO



SOBRE PRODEBISO

PRODEBISO es una empresa innovadora fundada en 2013 e integrada por un equipo de ingenieros biomédicos y técnicos calificados para dar mantenimiento a equipo médico e instrumental quirúrgico, así como la venta de accesorios.



MISIÓN

Ofrecer un servicio profesional y eficiente para mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico e instrumental quirúrgico, además de la venta de equipos médicos y consumibles.


VISIÓN

Ser la empresa de referencia por calidad y atención en el sector de mantenimiento y venta de equipo médico e instrumental quirúrgico.



SECUENCIA DE REPARACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

PROCESO PRODEBISO

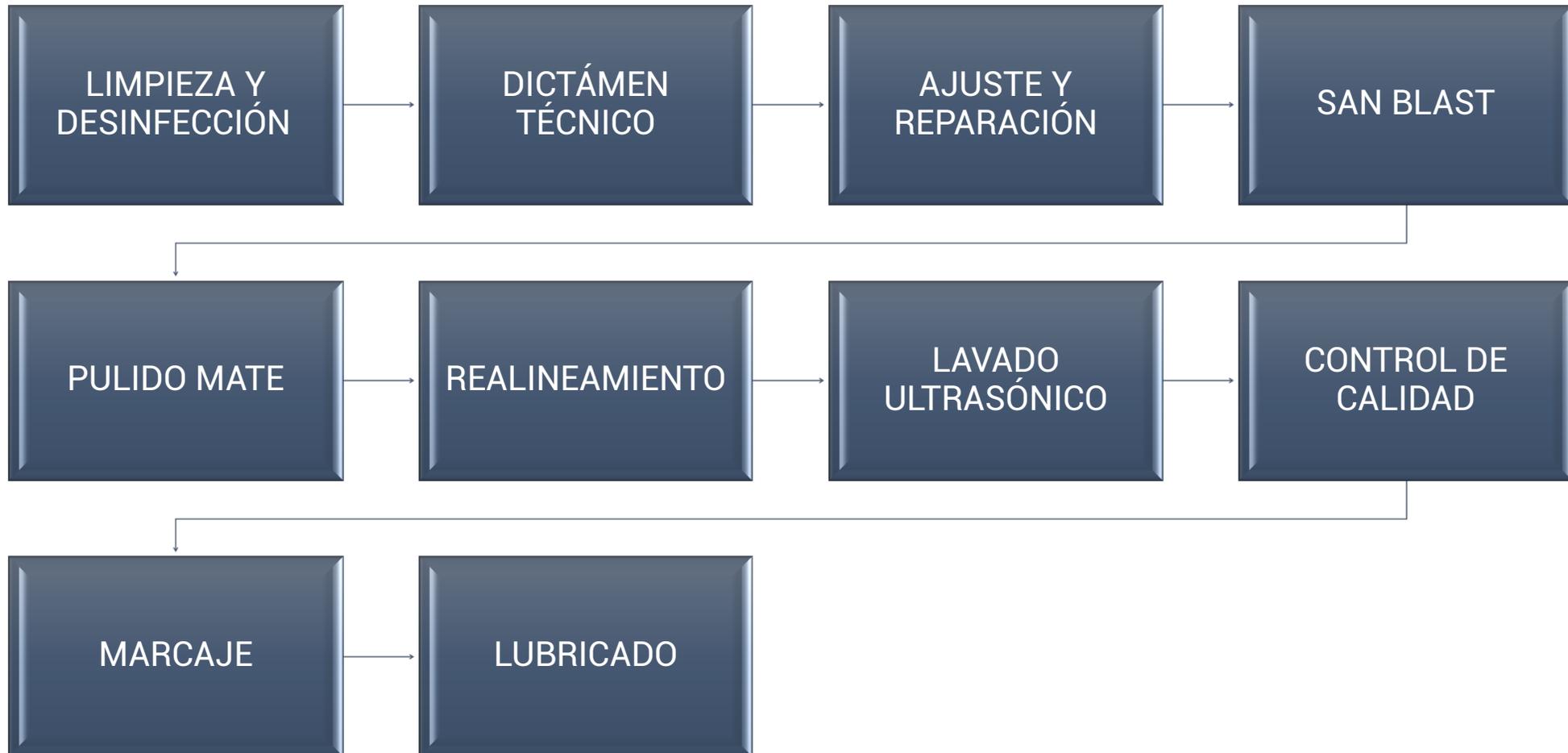

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Proceso mediante el cual, eliminamos cualquier riesgo de contaminación al personal que tendrá contacto directo con los instrumentos



DICTÁMEN TÉCNICO

Se hace un dictamen técnico minucioso, aquí se determinan las necesidades para la reparación como. refacciones o alguna fabricación especial.



AJUSTE Y REPARACIÓN

Durante esta actividad se realiza la mayoría de los mantenimientos correctivos: desarmado, rectificación, ajuste, afilado, reemplazo de insertos, fabricación de piezas, etc.



SAN BLAST

Se realiza una profunda limpieza a todos los instrumentos por medio de arena sílica (micro-esferas) aplicada a presión de aire sobre la superficie externa partes dentadas o estriadas así como en lugares de difícil acceso del instrumento.

Este proceso también nos permite que la porosidad que esta en la superficie se cubra.



PULIDO MATE

Se realiza utilizando fibras de oxido de aluminio, puliendo el instrumento y dejando un terminado mate.



REALINEAMIENTO

Procedimiento en el cual se checa el instrumental y se retiran golpes o marcas provenientes del afilado, alineado, etc.




LAVADO ULTRASÓNICO

Este proceso nos ayuda a retirar los polvos y residuos de las fibras y San Blast de la arena sílica.



CONTROL DE CALIDAD

Actividad en la cual se revisa el completo funcionamiento del instrumento reparado y se determina si es necesario su reajuste o pasa a la siguiente actividad.

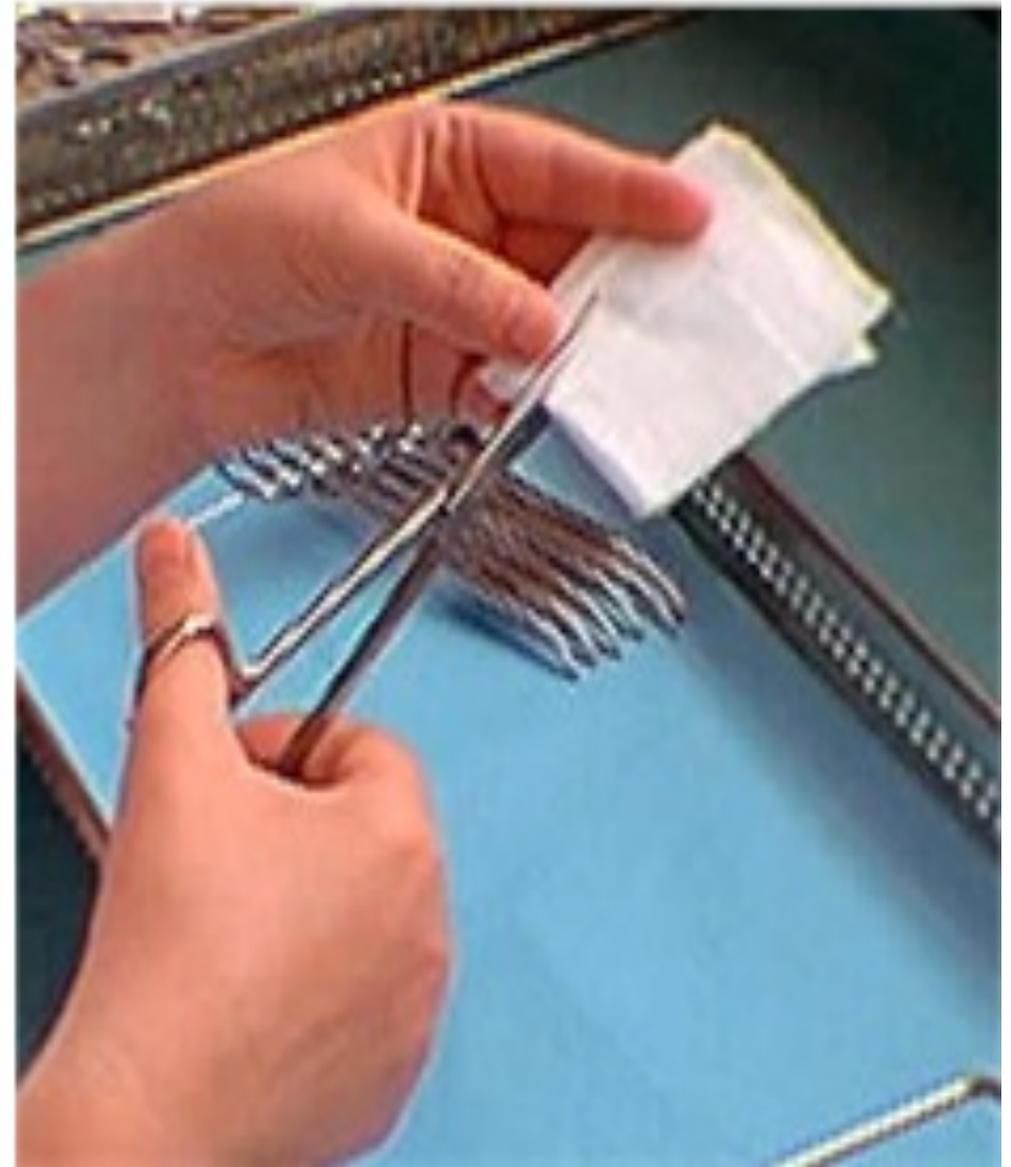

MARCAJE

Marcado del instrumento de acuerdo a peticiones particulares; es decir, nombre, fecha, iniciales, si este se encuentra especificado dentro del mantenimiento, área, etc.



LUBRICADO

Cuando el instrumento es reparado y con control de calidad aprobado, es lubricado con aceite para instrumentos quirúrgicos.



Cuando algún instrumento no es posible repararlo, se empaqueta en bolsa y se coloca la leyenda: MATERIAL SIN REPARACIÓN, y un dictamen del motivo por el cual no fue posible su reparación





LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

Situación: Los hospitales presentan un problema en sus inventarios al no tener identificado realmente el estatus del instrumental.

Solución: Ofrecemos hacer un chequeo de todo el instrumental dentro del hospital para saber que cantidad tienen y en que condiciones se encuentra.

Resultado: Elaboración de informe que incluye: inventario total de piezas por especialidad y subespecialidad, además del instrumental adicional. El estado del instrumental y fotografías de soporte.

INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES

La información proporcionada por el equipo de expertos de **PRODEBISO** le permitirá decidir:

1. La **inversión** que llevara el cambio y la reparación del instrumental.
2. Determinar cuánto **tiempo de vida** puede tener el instrumental conforme a las marcas que dispone el hospital.
3. Hacer un **plan de servicio permanente**, que le permita tener a punto todo su instrumental.
4. Evitar comprar instrumental que puede ser reparado, lo que significa un **ahorro sustancial** en los recursos.



Yadira Sánchez González

Representante Legal

Celular: 55 1353 0008

Oficina: 55 88918014

ysg@prodebiso.com.mx

www.prodebiso.com.mx